
104-173

問題文

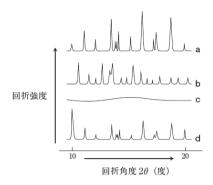

- 1. 固体a~dの回折パターンを比較することにより、それぞれの結晶の外観の相違を判断できる。
- 2. 固体aと固体bの回折パターンを比較することにより、固体aの水分量は固体bより多いことが判断できる。
- 3. 固体aと固体dの回折パターンから、両者の結晶の単位格子の大きさが異なっていることが判断できる。
- 4. 固体bと固体dは、結晶多形の関係にあると判断できる。
- 5. 固体cの回折パターンから、本品の結晶性は著しく低いことが判断できる。

解答

4, 5

解説

粉末 X 線回折パターンでわかるのは、 **粉末の結晶** がどのような **構造** をしているか、 **結晶の純度** といった情報です。

選択肢 1~3 ですが

「外観の相違」は、肉眼でわかることですが、X線回折パターンからはわかりません。 「水分量」について、このパターンから読み取ることはできません。

ピークが見られる 20 の位置が a と d は完全に一致しています。よって、単位格子の大きさは同じと考えられます。

選択肢 4.5 は妥当な記述です。

以上より、正解は 4,5 です。 参考)